


产品说明书

alpha smooth muscle Actin Antibody

货号：ABB5027

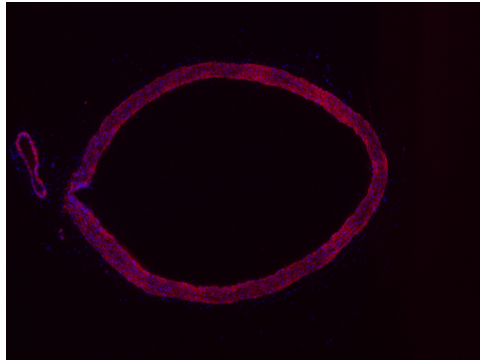

产品名称	alpha smooth muscle Actin Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC IP FC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 IP 1:30
有效期	one year
别名	Actin, aortic smooth muscle; Alpha-actin-2; ACTA2; ACTSA; ACTVS; GIG46;
免疫原	A synthesized peptide derived from human alpha smooth muscle Actin
SwissProt	P62736
分子量	42kDa
产品介绍	Defects in ACTA2 are the cause of aortic aneurysm familial thoracic type 6 (AAT6) [MIM:611788]. AATs are characterized by permanent dilation of the thoracic aorta usually due to degenerative changes in the aortic wall.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com